





SMART
BREATHE-AIR PRO



CHAPTER

1. 제품 한눈에 보기
2. 구성품
3. 전원 & 기본 조작
4. 앱 설치 & 계정
5. 기기 - 앱 연결
6. 앱 UI 이해하기
7. 훈련 및 주의사항
8. 사용 후 관리 & 위생

제품 한눈에 보기

FRONT VIEW

REAR VIEW

MOUTHPIECE



SMART
BREATHE-AIR^{PRO}

구성품



에어 바디



마우스 피스








레버 조절기

전원 & 기본 조작



앱 설치 & 계정

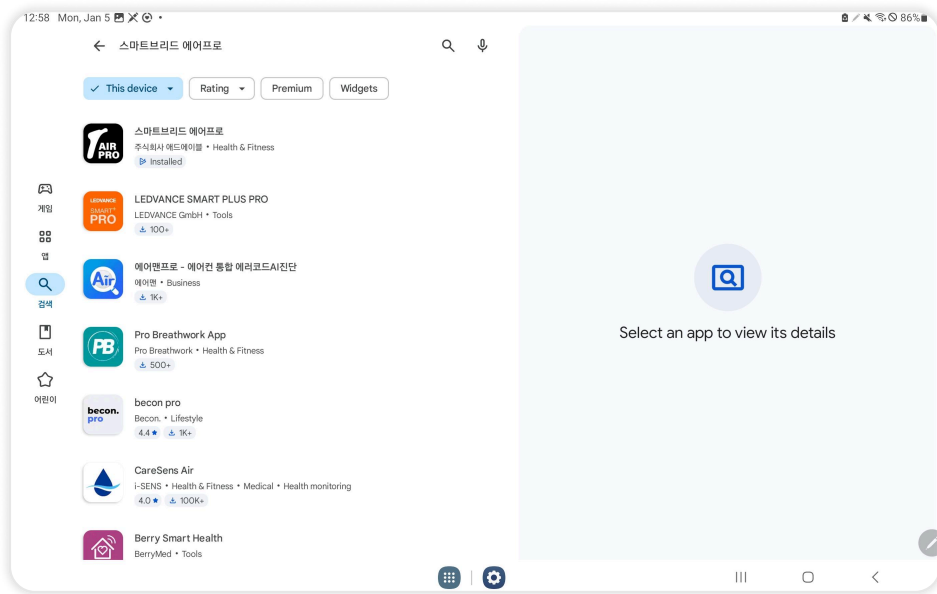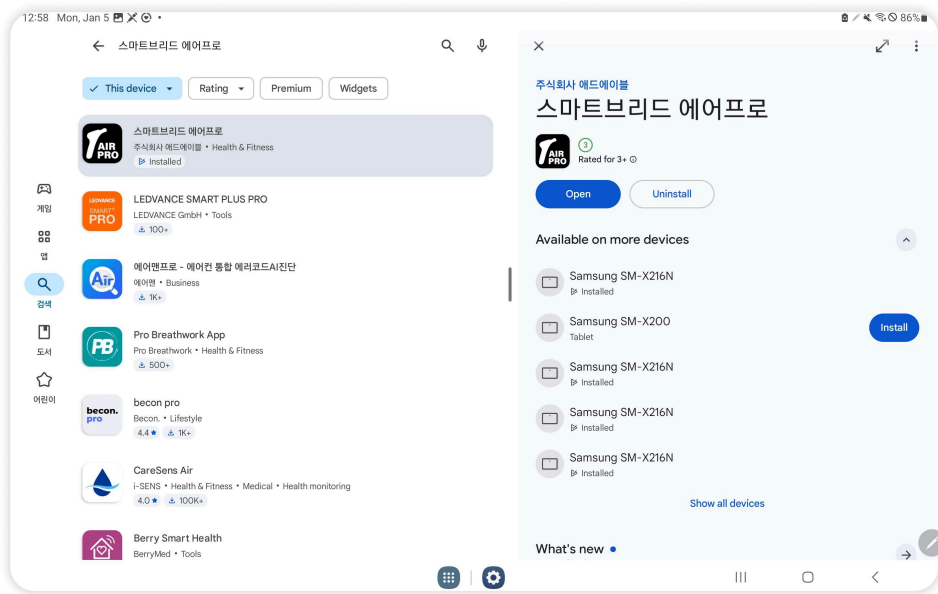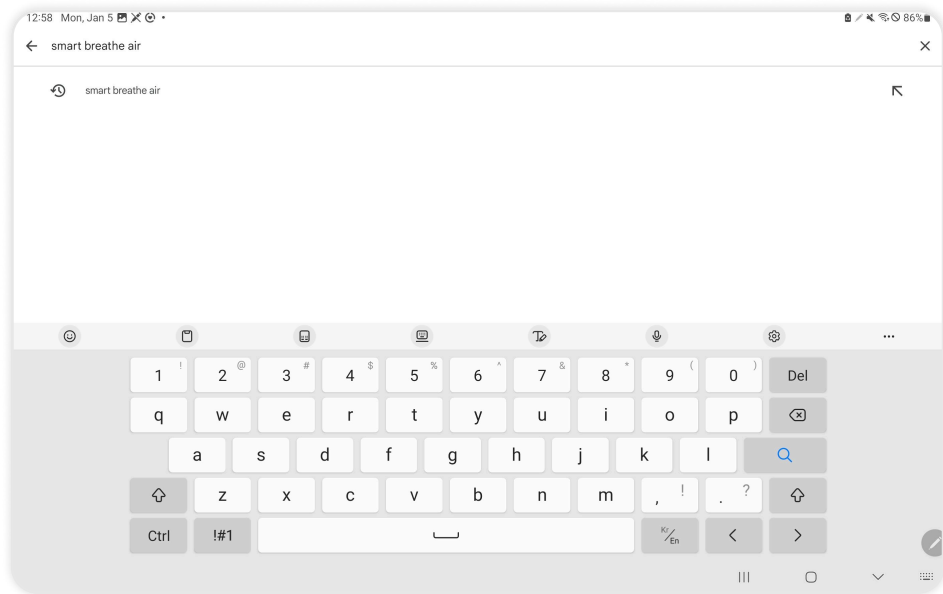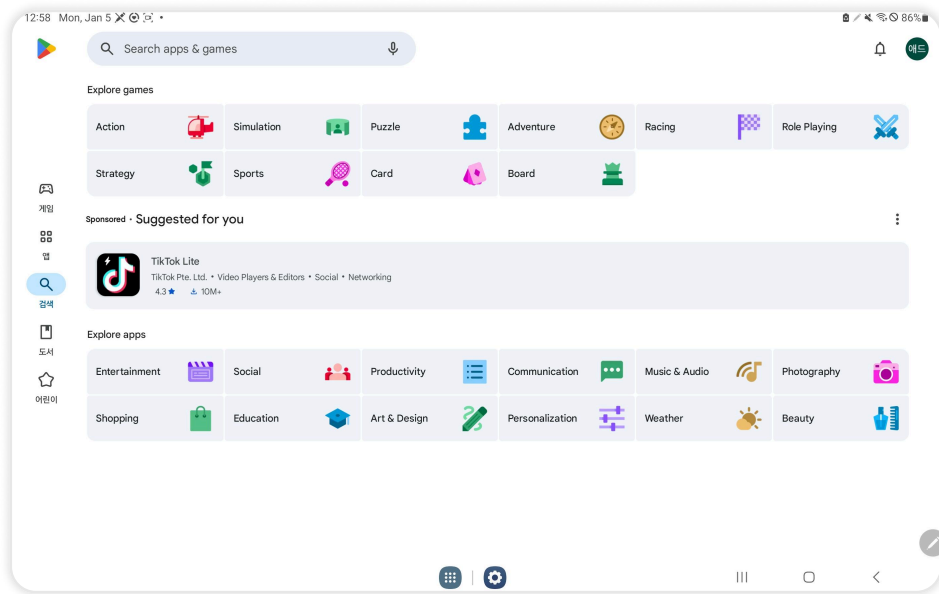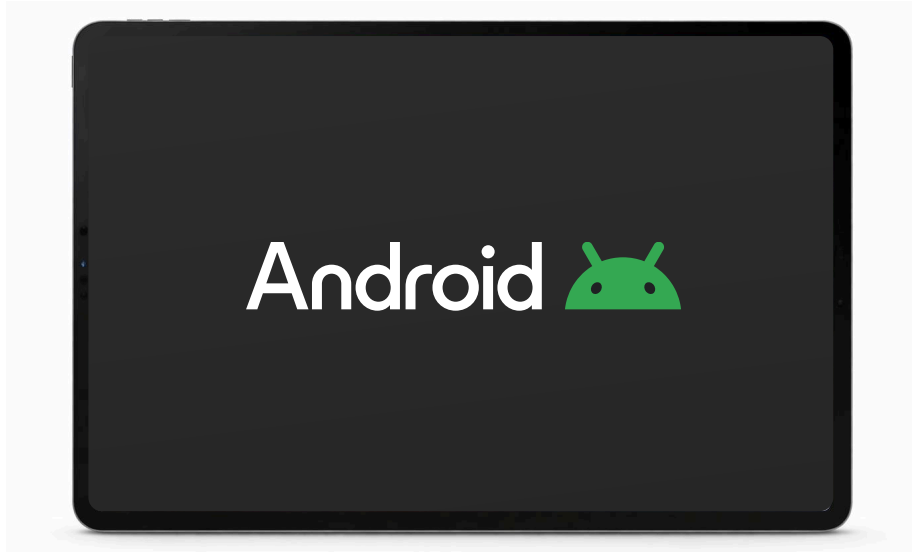

(태블릿 전용 앱입니다.)

앱 설치 & 계정



최초로 접속 시
추가 다운로드가 있습니다.



회사 (주)애드에이블로부터 제공받은
기관명과 기관 코드를 입력합니다.

앱 기관 로그인

기관 정보입력

→

등록하실 기관명과
제공받은 기관코드를 입력해주세요.

기관명

기관명을 입력해주세요

기관코드

영숫자 10자리 입력

등록

앱 설치 & 계정

기관에 대한 비밀번호 생성을 해주세요

앱 기관 로그인

기관 비밀번호 등록

등록하실 비밀번호를 입력해주세요.

기관 비밀번호

숫자 4자리를 입력해주세요

비밀번호 확인

기관 비밀번호를 다시 입력해주세요

로그인

앱 설치 & 계정

케어 기관의 관리자를
생성해주세요



관리자 추가

관리자는 환자를 관리하는
의료진을 말합니다.

관리자를 추가하시려면 기관 비밀번호를
입력하셔야합니다.

관리자 생성

관리자 선택

Addable



데이터 전송



관리자 추가



앱 설치 & 계정

기관 비밀번호를 입력하여
관리자를 생성해주세요

관리자 생성

관리자 추가



기관 비밀번호를 입력해주세요

기관명
천안아산대형병원

기관비밀번호

기관비밀번호를 입력해주세요

비밀번호 찾기

로그인

앱 설치 & 계정

관리자가 있는 팀 또는 부서와 이름을 입력해주세요

관리자 생성

관리자 등록



부서

관리자 이름

비밀번호

비밀번호 확인

등록하기

앱 설치 & 계정

관리자를 선택하여 환자 또는 회원을 생성해주세요.

천안네추럴케어

호흡재활팀

기관명

부서

관리자 생성

관리자 선택

Addable

Q



데이터 전송



관리자 추가



천안아산대형병원

치료실

강남세브란스병원

호흡재활실

앱 설치 & 계정

환자나 회원을 생성해주세요.



사용자 추가

홍길동

15159898

환자(회원) 성함

환자(회원) 번호

환자 또는 회원 생성

사용자 선택

←

Addable

Q

사용자 추가

🗑

앱 설치 & 계정

사용자 추가를 위해서는
기관비밀번호를 입력하셔야합니다.

환자 또는 회원 생성

사용자 추가



사용자 추가를 위해
기관 비밀번호를 입력해주세요

부서명
치료실

기관비밀번호

기관비밀번호를 입력해주세요

비밀번호 찾기

로그인

앱 설치 & 계정

환자 또는 회원의 정보를 입력해주세요.

추후 호흡 훈련시 필요한 정보입니다.

환자 또는 회원 생성

기본정보 등록



성함

성

이름

환자번호

남

여

생년월일

ex) 19990909

신장 / 몸무게

cm

kg

다음

인터페이스 이해하기

이 페이지에서는 각종 훈련 시간이 표시되고 특히 FVC (폐활량 측정) 수치도 확인 가능합니다.

홈화면

☰

👤

🕒

🫁

🕒

🔇

📄

2026.01.05

👤

안녕하세요!
김호흡 님

내 정보 변경

최근 측정한 FVC 수치

최근 측정 2025.03.11 | 이전 측정 2025.03.09

폐활량 측정
FVC (L)

6L

6L

06

황격막 훈련시간

어제	43분	오늘	43분
지난주	21분	이번주	43분

체력 훈련시간

어제	43분	오늘	43분
지난주	21분	이번주	43분

당신의 폐 나이는?

🫁

18세

인터페이스 이해하기

폐 나이 측정을 위한 기기연결



위의 아이콘 (폐나이 측정)을 누르면
폐 나이 측정과 자연호흡 측정이 나옵니다.

☰

👤

🫁

🕒

🚫

📶

측정 메뉴 선택

폐 나이 측정하기

자연호흡 측정하기

인터페이스 이해하기

페 나이 측정을 위한 기기연결



위의 아이콘 (페나이 측정)을 누르게 되면
기기 연결 페이지로 넘어갑니다.



1 기기의 전원버튼(2초)을
눌러주세요



2 두번째 버튼(자동부하)을
한번 눌러주세요.



블루투스 연결

연결하시려면 아래 버튼을 눌러주세요

연결하기

왼쪽의 단계를 모두 완료한 후, 연결하기를 눌러주세요.

인터페이스 이해하기

연결이 완료되면 측정을 할 수 있습니다.



설정이 완료되었습니다.

폐 나이 측정으로 넘어갑니다.

측정을 하기 위한 튜토리얼은
앱에서 안내하는대로 따라주시면 됩니다.

안내가 나오는데로 호흡측정을 해주세요.

측정하기 (폐 나이 측정)

폐 나이 측정



1 / 3

6초 동안 있는 힘껏 숨을 내뿜으세요!



날숨 측정 값

0



6.00



인터페이스 이해하기

측정하기 (폐 나이 측정)

총 세번을 측정하여 폐나이를 확인합니다.


추천 훈련 난이도를 제시하며
환자 또는 회원에게 호흡 훈련을 할 때
도움이 될 수 있습니다.

폐 나이 측정 결과



측정 결과
측정한 모든 결과

추천 훈련 난이도는 상급입니다.

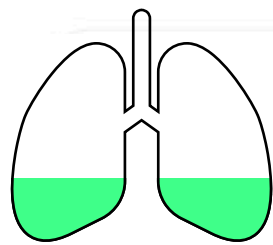

폐 나이
당신의 폐나이는?

51 세

폐활량 측정	측정단위	기준치	최고 측정치	비교
FVC	L	4.09	3.07 ▲	75.06




홈으로 가기

인터페이스 이해하기

자연호흡을 시작하기 전에
기기의 두번째 버튼(자동부하)이
켜져있는지 자세히 봐주세요.



자연 호흡 (1분간 편안한 자세에서의 호흡 횟수와 용량측정)

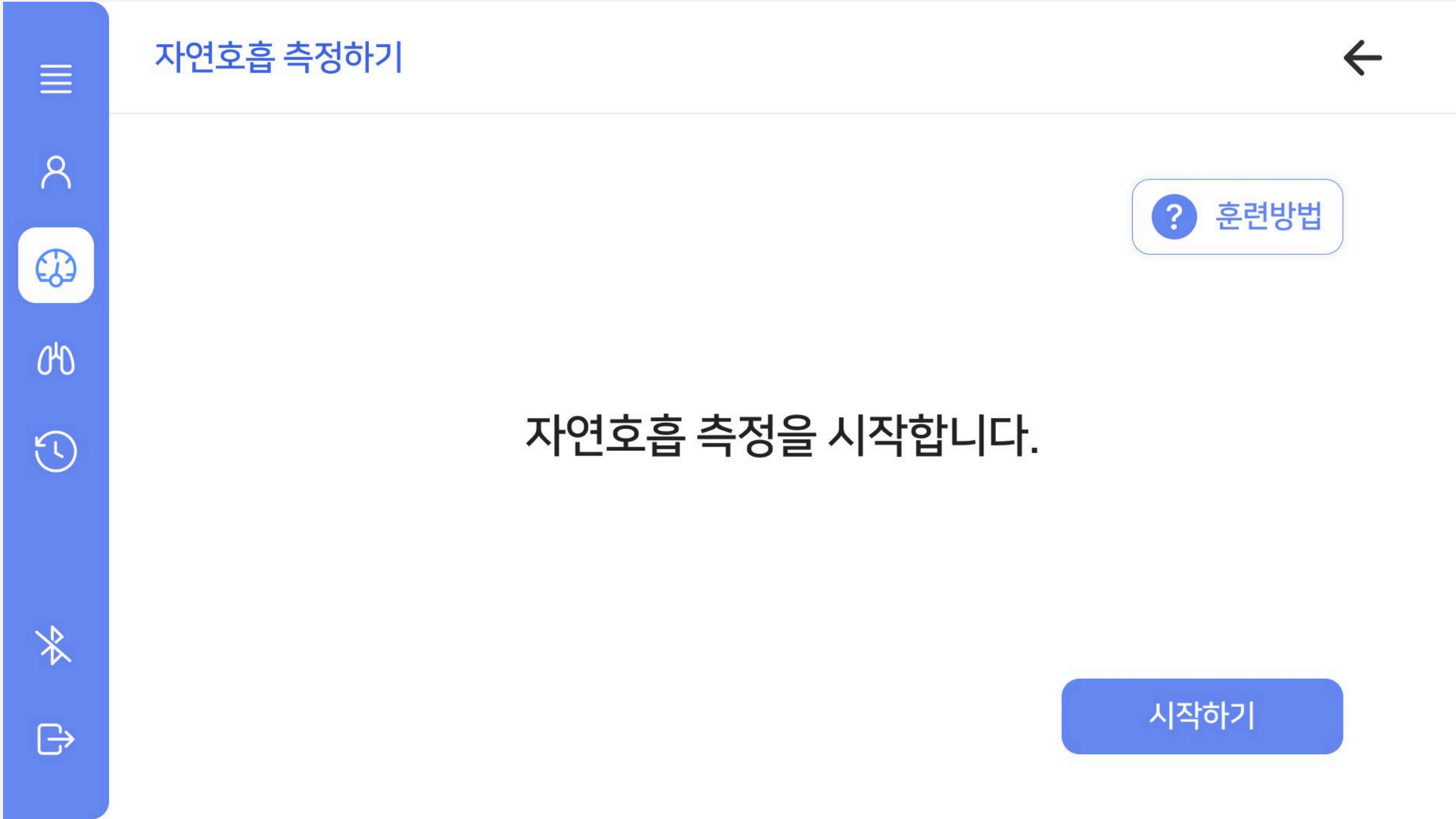


인터페이스 이해하기

자연호흡은 1분동안 자유롭게
호흡을 측정합니다.

성인 기준으로 얼마나 호흡을 했는지
측정을 하여 폐 기능이 좋은지 나쁜지
판단하기에 용이 할 수 있습니다.

자연 호흡 1

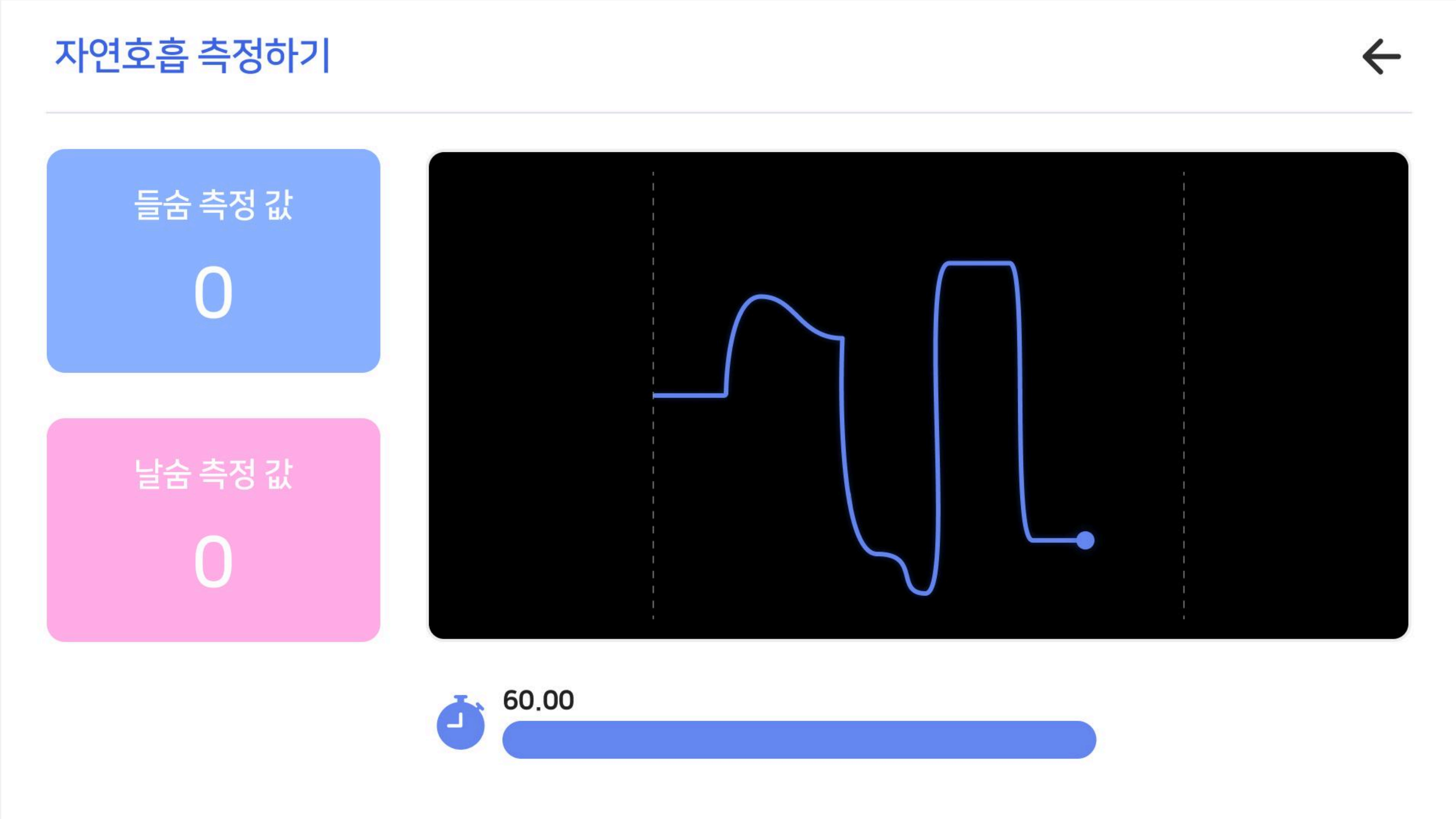

인터페이스 이해하기

자연호흡은 1분동안 자유롭게
호흡을 측정합니다.

성인 기준으로 얼마나 호흡을 했는지
측정을 하여 폐 기능이 좋은지 나쁜지
판단하기에 용이 할 수 있습니다.

자연 호흡 2


자연호흡 측정 결과



성인의 1분 정상 호흡수는
15회 ~ 20회 입니다.

총 호흡 수 27.06 회
1회 호흡 평균시간 4.0 초

총 호흡 량 41.01 L

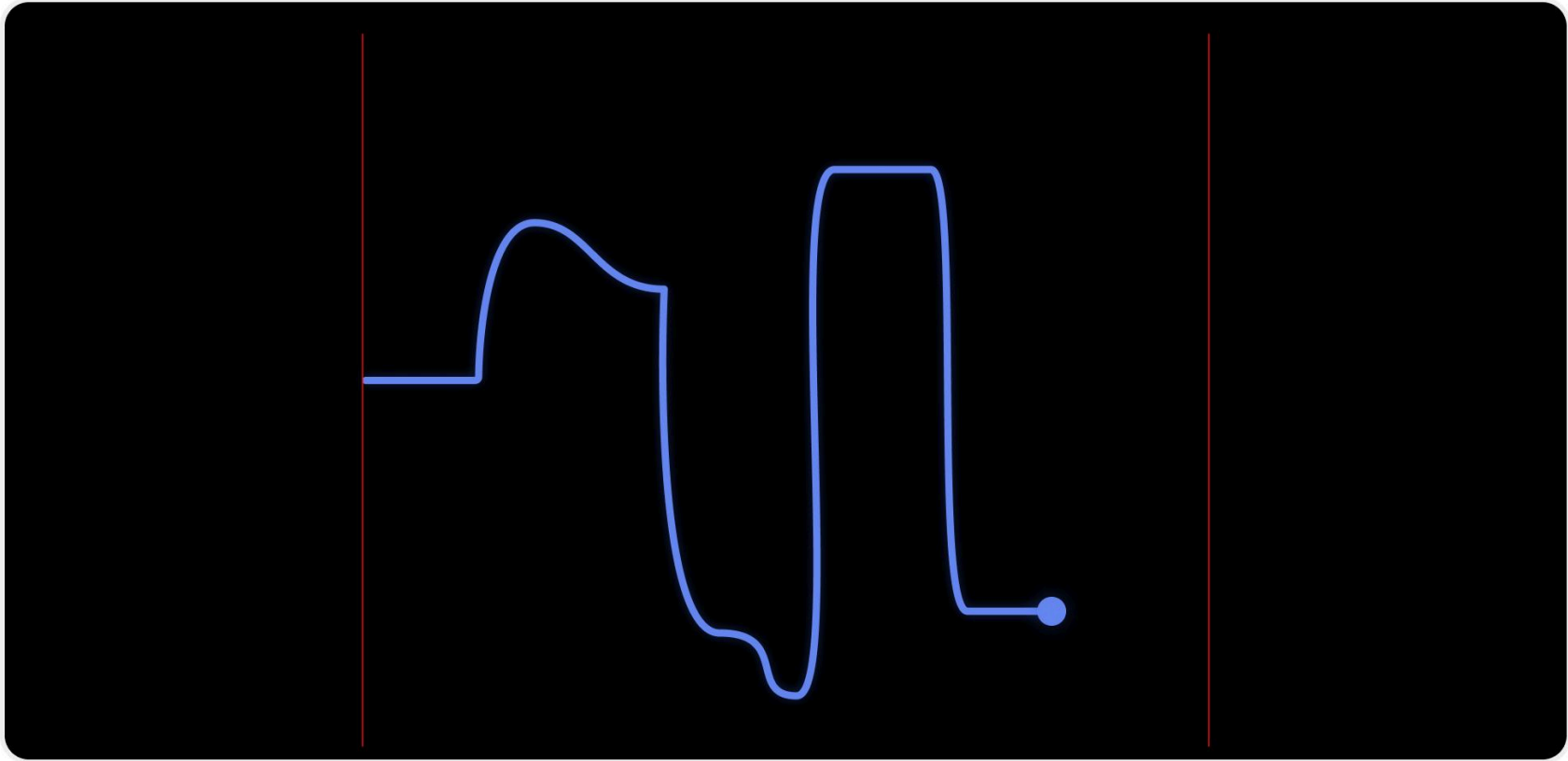


그만하기

측정완료

인터페이스 이해하기

홈화면의 폐 아이콘을 눌러주세요

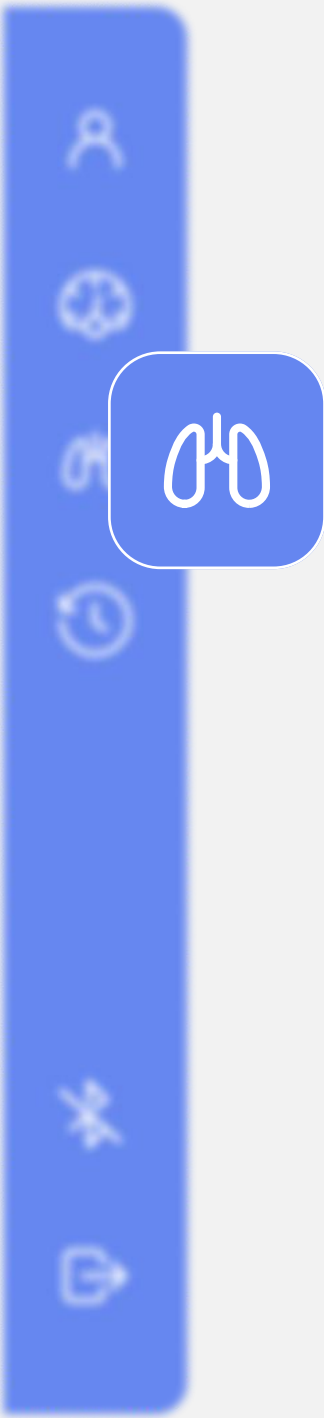

호흡 훈련

☰

👤

🕒

🫁

🕒

🚫👤

📄➡

호흡하기

←

▶

호흡 교육

호흡에 대한
영상을 보여줍니다.

🫁

횡격막 훈련

게임을 통한
호흡훈련을 합니다

🧘

체력 훈련

움직이면서
호흡을 연습합니다.

🧘

정리 운동

호흡과 몸을 천천히
안정시키는
마무리 단계입니다.

인터페이스 이해하기

호흡 훈련 - 교육

훈련에 대한 호흡 교육의 UI입니다.
시작하기를 누르면 영상이 시청됩니다.



영상을 재생합니다.



영상을 잠시 멈춥니다.



영상을 크게 봅니다.

호흡 교육

호흡 교육

시작하기

총 훈련 시간

00:00

영상 시간


00:00

반복 횟수

00:00

인터페이스 이해하기

기기와 상호작용하여 들숨과 날숨에 따른 게임을 할 수 있습니다.

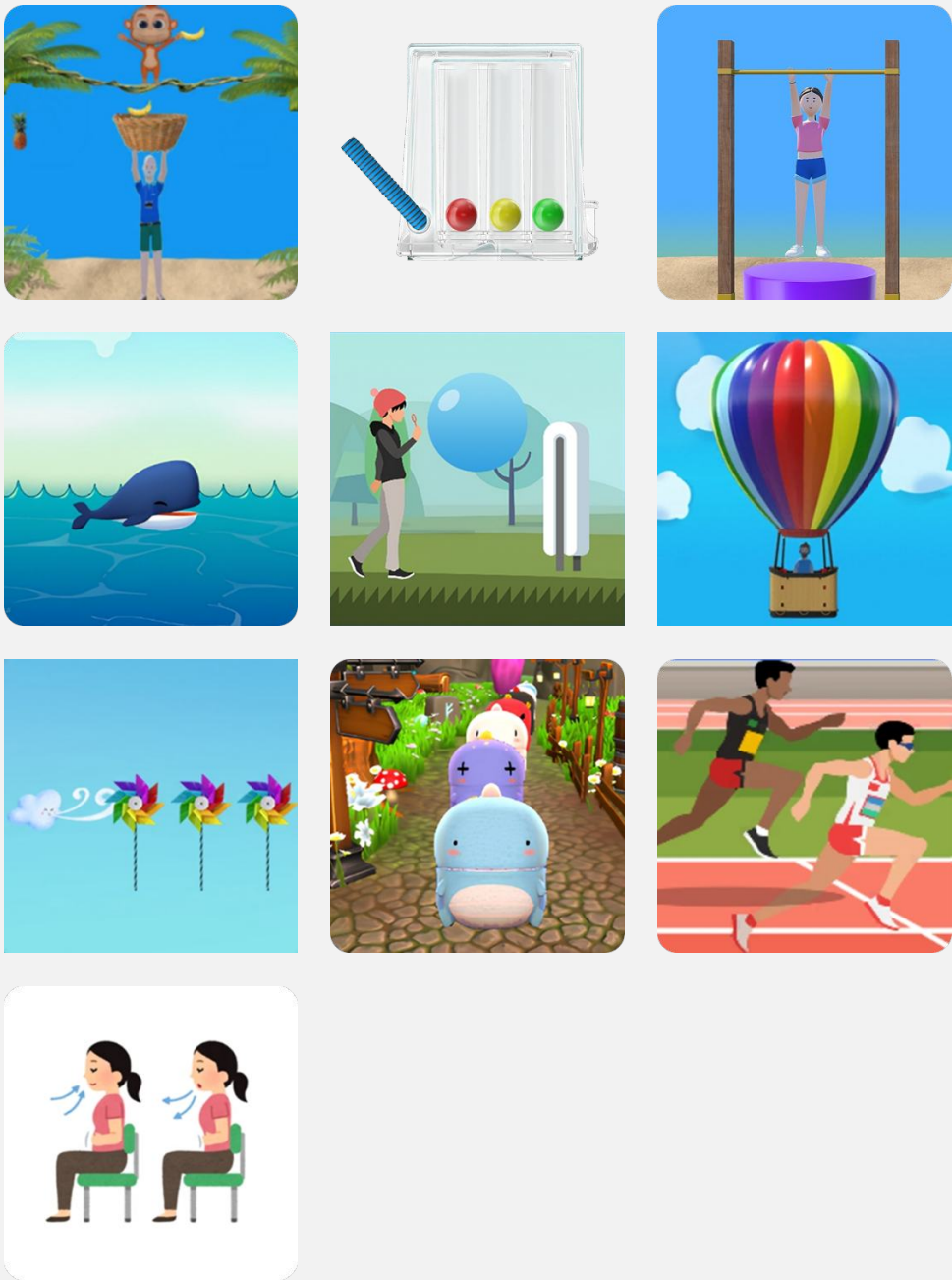

호흡 훈련 - 횡격막 훈련

횡격막 훈련



추천 난이도

상 (2025.03.12 기준)

? 훈련방법

들숨 호흡 운동

들숨/날숨 혼합 운동

날숨 호흡 운동


마무리 운동

인터페이스 이해하기


호흡 훈련 - 횡격막 훈련 - 게임 설정

게임의 제목입니다.

- 시작하기 전 난이도를 설정 할 수 있습니다.
- 자연호흡 / 폐나이 측정에 따라 난이도가 자동으로 설정되어있지만 자유롭게 수동설정이 가능합니다.

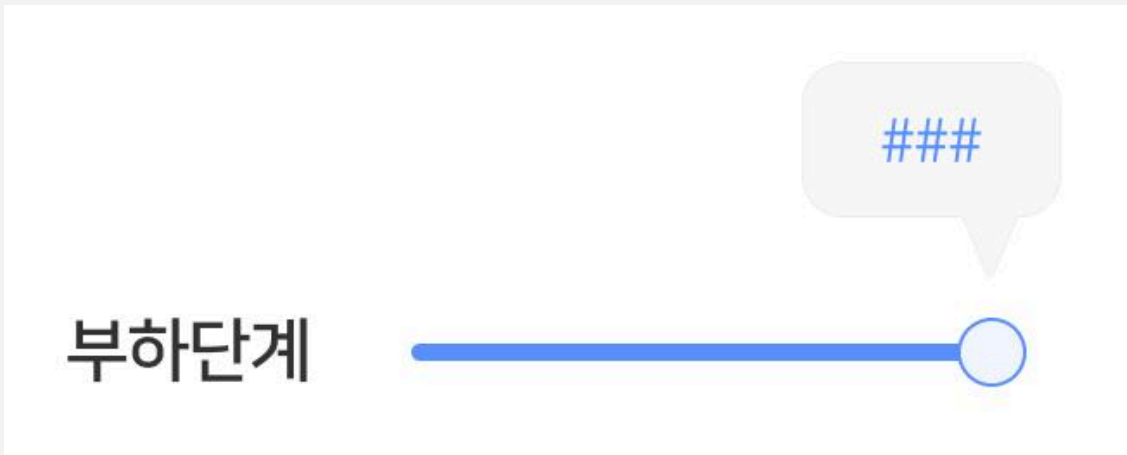

부하 단계를 조정하면 기기의 부하장치가 자동으로 조절됩니다.

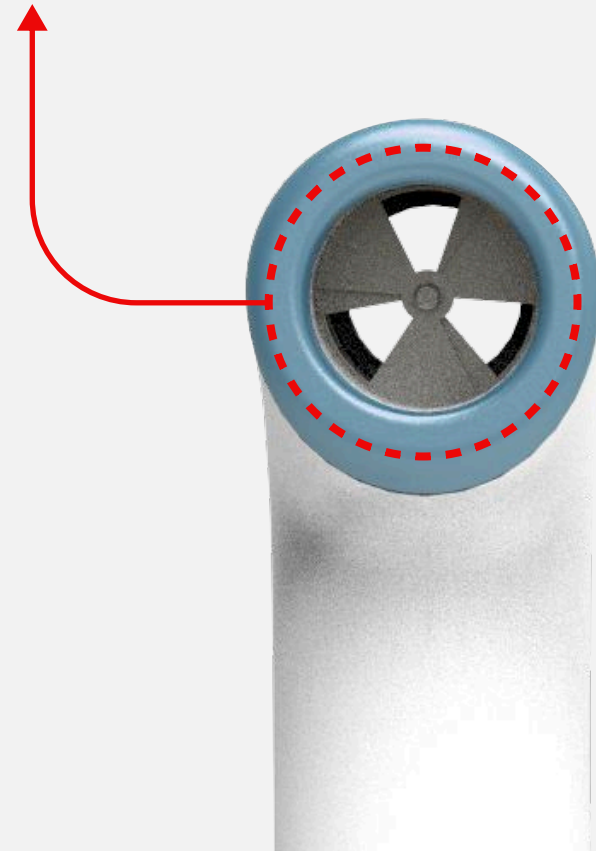

철봉운동 - 난이도 설정

추천 난이도
상 (2025.03.12 기준)

? 훈련방법

철봉 운동

부하단계

8단계

난이도

◀ 하 ▶

시작하기

인터페이스 이해하기

운동을 하면서 가장 중요한 호흡 방법을
키우기 위한 체력운동입니다.

난이도마다 각종 다른 영상들이
준비되어있습니다.

호흡 훈련 - 체력훈련

체력훈련

난이도 하 (누운 자세)

난이도 중 (앉은 자세)

난이도 상 (앉은 자세)

자유훈련

←

총 훈련 시간

00:00

영상 시간

00:00

반복 횟수

00:00

체력 훈련 - 난이도 하

시작하기

인터페이스 이해하기

자유운동은 운동을 정해서
영상을 시청 할 수 있습니다.

또는 환자나 회원에게 맞는
운동을 안내해주면 사용하기에
용이할 수 있습니다.

호흡 훈련 - 체력훈련 - 자유운동

자유훈련

난이도 하 (누운 자세)

난이도 중 (앉은 자세)

난이도 상 (앉은 자세)

자유훈련

←

누운 자세

스트레칭

준비 운동

호흡 운동

근력 운동

유산소 운동

정리 운동

앉은 자세

스트레칭

준비 운동

호흡 운동

근력 운동

유산소 운동

정리 운동

인터페이스 이해하기

자유운동은 운동을 정해서
영상을 시청 할 수 있습니다.

또는 환자나 회원에게 맞는
운동을 안내해주면 사용하기에
용이할 수 있습니다.

스트레칭 (누운 자세)

누워서 다리 꼬기

▼

체력 훈련 - 난이도 하

동영상 해상도에 맞춰서 넣어주세요

시작하기

영상 시청중에도 운동을 고를 수 있습니다.

호흡 훈련 - 체력훈련 - 자유운동

자유훈련

난이도 하 (누운 자세)

난이도 중 (앉은 자세)

난이도 상 (앉은 자세)

자유훈련

←

누운 자세

스트레칭

준비 운동

호흡 운동

근력 운동

유산소 운동

정리 운동

앉은 자세

스트레칭

준비 운동

호흡 운동

근력 운동

유산소 운동

정리 운동

인터페이스 이해하기

호흡 훈련 - 정리운동

호흡 훈련을 모두 완료하고 숨을 고르고 몸을 편안하게 쉬게 하는 운동영상입니다.

정리 운동

정리운동

시작하기

총 훈련 시간

00:00

영상 시간


00:00

반복 횟수

00:00

인터페이스 이해하기

호흡훈련을 했던 기록들을
모아둔 페이지입니다.

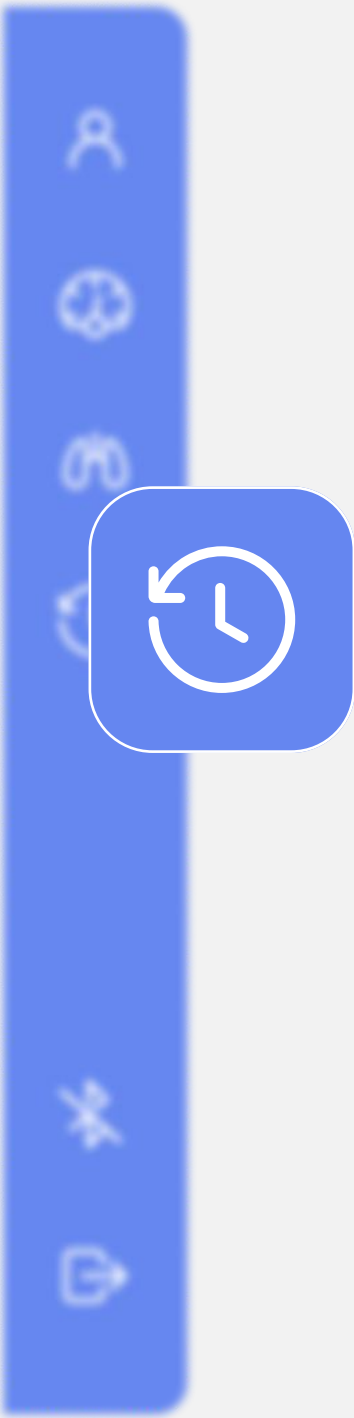

호흡 훈련 - 기록

기록

←

폐 나이 측정

호흡 교육

횡격막 훈련

자연호흡 측정

체력 훈련

폐활량 측정

FVC

측정단위

L

기준치

4.09

최고 측정치

3.07 ▲

비교 %

75.06

당신의 폐 나이는?

18세

훈련 및 주의사항




- 호흡 측정 또는 횡격막 호흡 훈련 시 어지럼증이 발생하면 즉시 중지해주세요.




- 제품을 떨어뜨리거나 잘못된 세척을 할 시 고장날 수 있습니다.

사용 후 관리 및 위생


기기 사용 후 관리

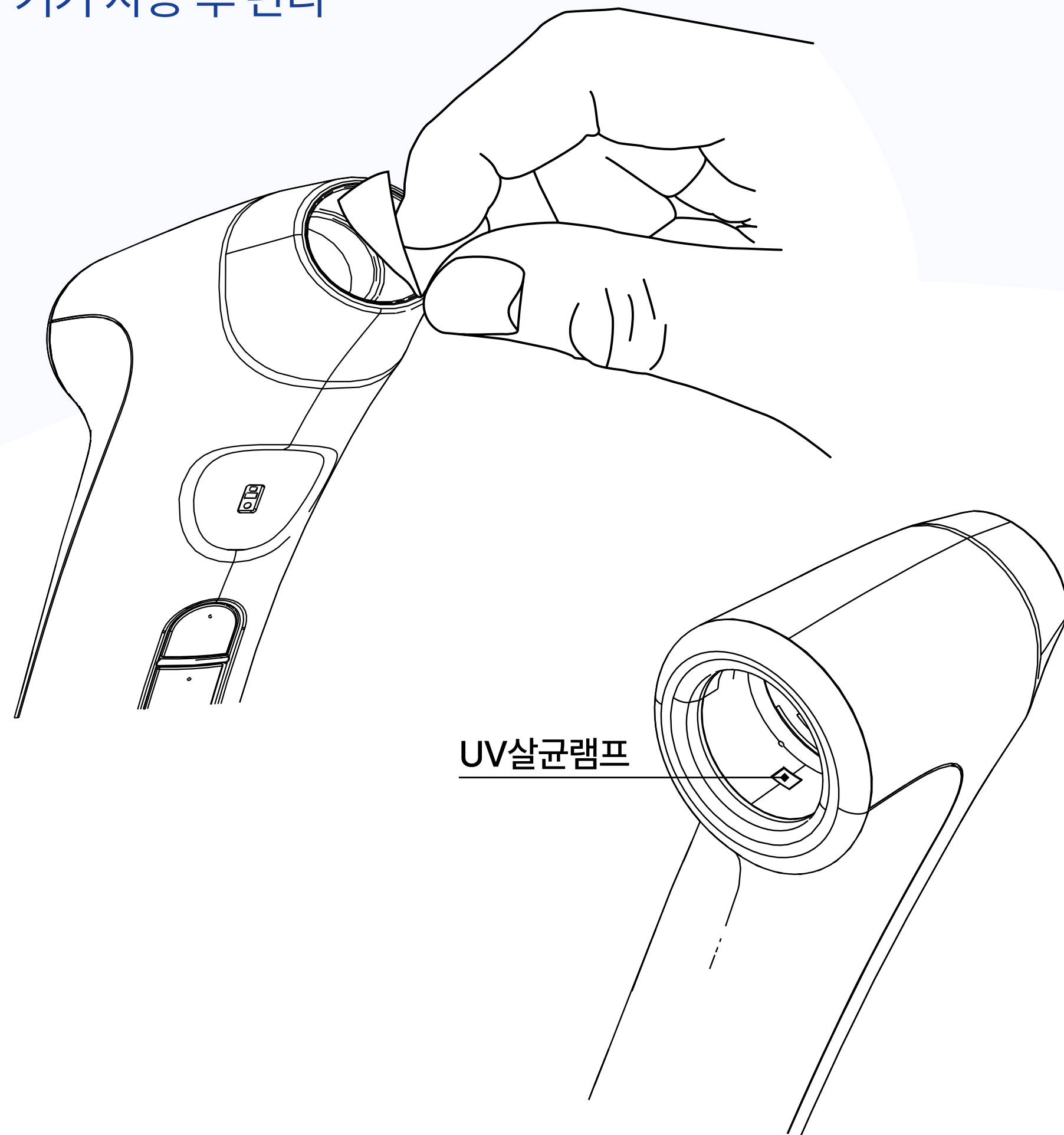

1. 알코올 솜 / 스왑으로 에어 기기의 앞과 뒤를 닦아줍니다.
2. 훈련 후 C-type 충전기를 사용하여 UV 소독을 해줍니다.
 - 기기는 충전시 작동하지 않습니다.
 - 충전 시 UV 소독이 3분간 작동합니다.
3. 일회용필터는 반드시 사용 후 버려주세요.

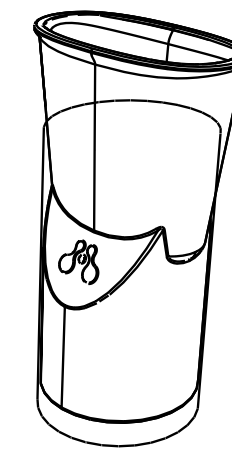

마우스피스
세척 후 재사용 가능

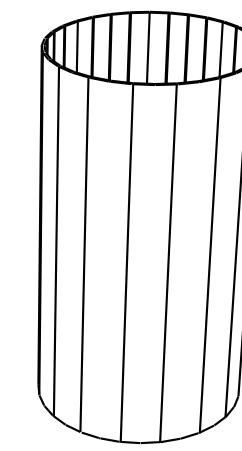

일회용필터
재사용 X